

A man with short blonde hair and glasses is shown in profile, sitting in a wheelchair. He is wearing a bright yellow t-shirt and blue jeans. He is positioned next to a white car, with his hand on the wheelchair's wheel. The background is a bright, slightly overcast sky. The overall mood is positive and active.

QUICKIE[®]
Live without limits.

Neon

Possibilités maximales, design moderne

Un modèle de modularité!

Ce fauteuil polyvalent offre un maximum de possibilités. Compact, il regorge de possibilités et affiche un design caractéristique et frappant.

Grâce à son châssis pliant et son dossier rabattable, le Quickie Neon se plie facilement et devient alors un fauteuil roulant très compact. De plus, le Quickie Neon est léger, à partir de 9.7 kg*.



Châssis avant Fixe

libre et autonome



Le Quickie Neon est le fauteuil parfait, qui s'adapte à toutes les circonstances et présente des résultats probants dans tous les domaines. En raison de la position serrée du cadre d'assise entre les flancs du cadre, le Quickie Neon offre une rigidité sans précédent dans l'histoire du fauteuil roulant à châssis pliant.



Design châssis (pliable) ouvert.



Facile à replier.

Des possibilités d'adaptations optimales

Une vaste gamme de possibilités de réglages et d'options rendent possible une adaptation du Quickie Neon aux souhaits les plus variés.



Réglage de l'inclinaison du dossier de -12° à $+8^{\circ}$.



Les tubes d'assise entre le cadre latéral confèrent une construction rigide.



Réglage de la hauteur d'assise et du centre de gravité avec une plaque d'axe courte.



Dossier aisément rabattable.

Apparence rigide et très compact



Swing Away

- Crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Le Quickie Neon Swing Away est disponible à partir d'un poids de 10.5 kg** et en version hémichâssis avec hauteur d'assise à partir de 35 cm.



Repose-pieds escamotables avec palettes en aluminium (dans la couleur du châssis) réglables en angle et profondeur



Facile à emporter.

Options & accessoires



Poignées de poussée rabattables.



Poignées de poussée réglables en hauteur.



Accoudoirs Desk livré dans la couleur du cadre et les accoudoirs sont réglables en hauteur.



Freins standard.



Freins à débattement.



Freins compacts.



Un repose-pieds en aluminium, pliable et réglable pour le Quickie Neon CF.




Porte GSM Quickie.



Porte-canne.

Le **Neon** peut être chargé dans
la plus petite des voitures.

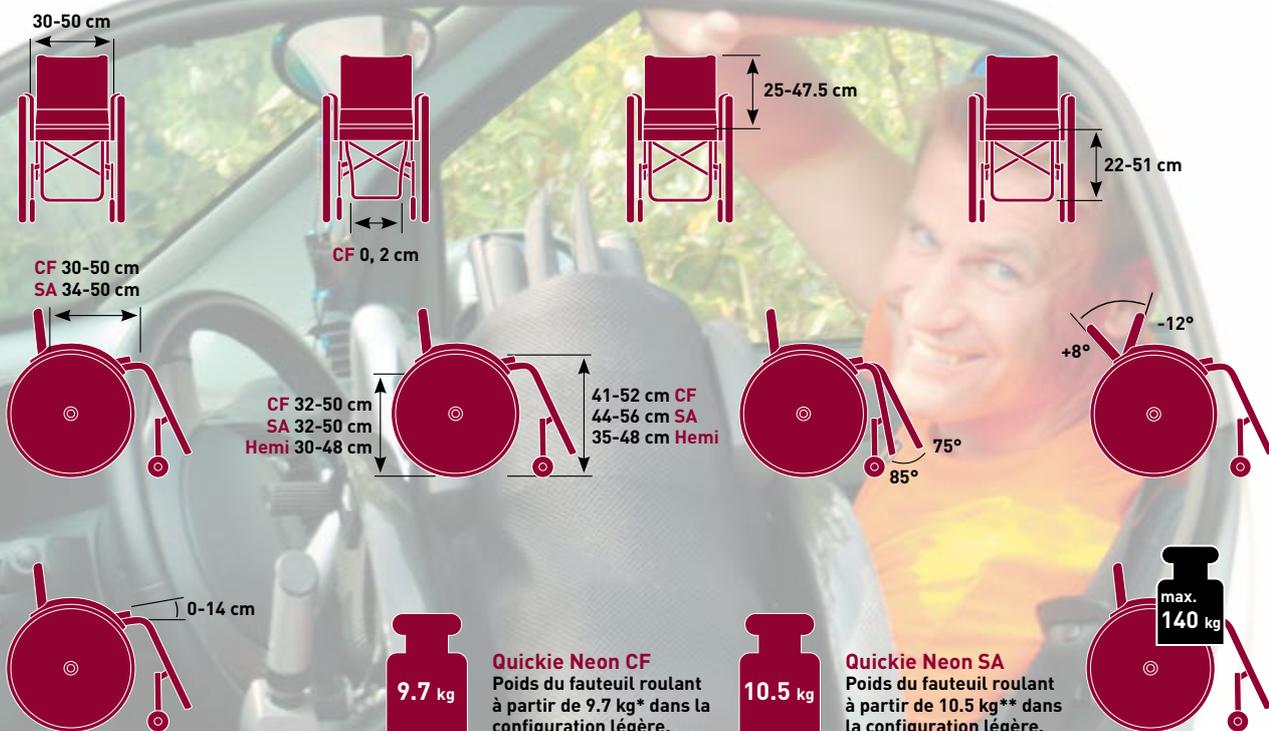

Spécifications techniques

Largeur d'assise:	30 - 50 cm	Inclinaison du siège:	0 - 14 cm
Profondeur d'assise (CF):	30 - 50 cm	Rétrécissement du châssis (CF):	0, 2 cm
Profondeur d'assise (SA):	34 - 50 cm	Carrossage:	0°, 2°, 4°
Hauteur de dossier:	25 - 47.5 cm	Charge à partir de (CF):*	9.7 kg
Inclinaison du dossier:	-12° - +8°	Charge à partir de (SA):**	10.5 kg
Longueur de jambe:	22 - 51 cm	Charge maximale:	140 kg

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.

Toutes ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d'inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

- Le Quickie Neon Swing Away est le seul à avoir été crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

* Configuration: 36x40 cm, hauteur de dossier 25 cm, roues ultra-légères, roues avant de 4", protège-vêtements, sans poignées de poussée, freins standard, repose-pied relevable.

** Configuration: 36x40 cm, hauteur de dossier 35 cm, roues ultra-légères, roues avant de 4", protège-vêtements, sans poignées de poussée, freins standard, repose-pieds en aluminium.



Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800
E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be